

EndoPredict®

Test Pronostique du Cancer du Sein

Test pronostique
EndoPredict
du cancer du sein
RE+/HER2-

Brochure d'information
pour les patientes



UN DIAGNOSTIC FRÉQUENT

Le cancer du sein est reconnu comme étant le cancer le plus fréquent chez la femme. Un cancer du sein a été diagnostiqué chez près de 2,3 millions de femmes dans le monde en 2020.¹ Environ 1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie.²

Mais tous les cancers du sein ne sont pas identiques. Ils sont donc traités de manière différente. Après une chirurgie initiale et parfois une radiothérapie, certaines femmes, atteintes d'un cancer du sein au stade précoce, positif aux récepteurs des œstrogènes (RE+) et négatif au récepteur HER2 (HER2-), peuvent être traitées, sans perte de chance, par une hormonothérapie seule pendant 5 ans. D'autres peuvent bénéficier d'une chimiothérapie et/ou d'une hormonothérapie prolongée.

Vous ne savez pas quel traitement du cancer du sein vous conviendrait le mieux ?




Un diagnostic de cancer du sein est une épreuve angoissante. Vous vous sentez peut-être dépassée par les décisions à prendre et cherchez des réponses.

Le test pronostique du cancer du sein EndoPredict® fournit des informations génomiques personnalisées sur le comportement de votre cancer du sein, ce qui vous permet, ainsi qu'à votre médecin, de choisir en toute confiance la prise en charge thérapeutique qui vous convient.

Quels sont les avantages d'EndoPredict pour vous ?

EndoPredict est un test génomique qui clarifie votre risque de récurrence du cancer du sein à court et à long terme, afin d'orienter les décisions thérapeutiques importantes quant à la prise en charge de votre cancer. Cela permet de personnaliser votre traitement.

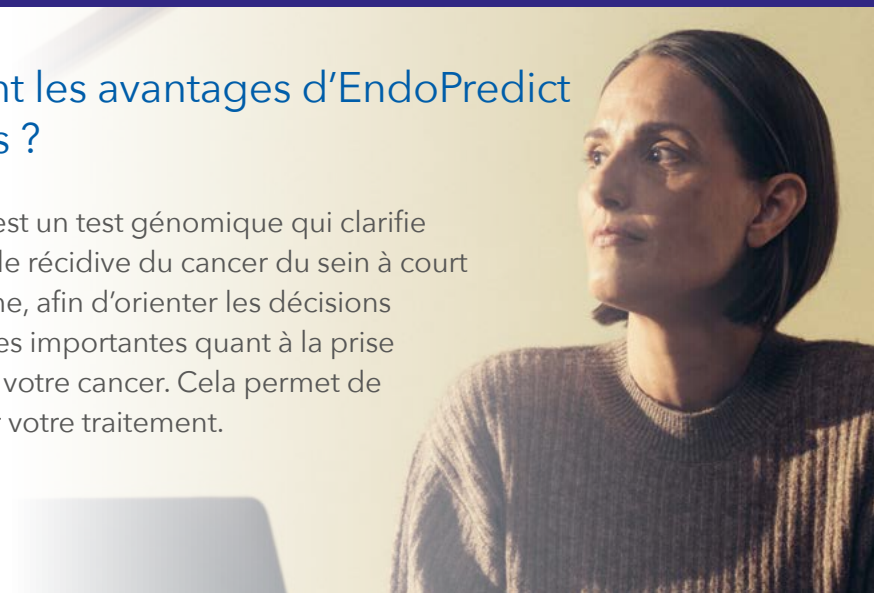

EndoPredict apporte des réponses à des questions majeures




- Quel est le risque de propagation de mon cancer en dehors du sein, à court et à long terme ?
- Suis-je éligible, après une intervention chirurgicale, à une hormonothérapie seule pendant 5 ans ?
- Bénéficierai-je d'une chimiothérapie ?

QU'EST-CE QU'ENDOPREDICT ?

EndoPredict est un test d'expression multigénique de deuxième génération, la plus récente, qui prédit la récurrence du cancer du sein. Il s'adresse aux femmes préménopausées et ménopausées atteintes d'un cancer du sein précoce (non métastatique), RE+, HER2-, avec ou sans ganglions lymphatiques envahis.

EndoPredict mesure avec précision l'activité de gènes spécifiques qui influencent la croissance tumorale afin d'obtenir un Score moléculaire de 12 gènes. Cela permet de connaître l'évolution probable du cancer et de rendre un pronostic. Des scores plus élevés sont associés à un plus haut risque de récurrence.

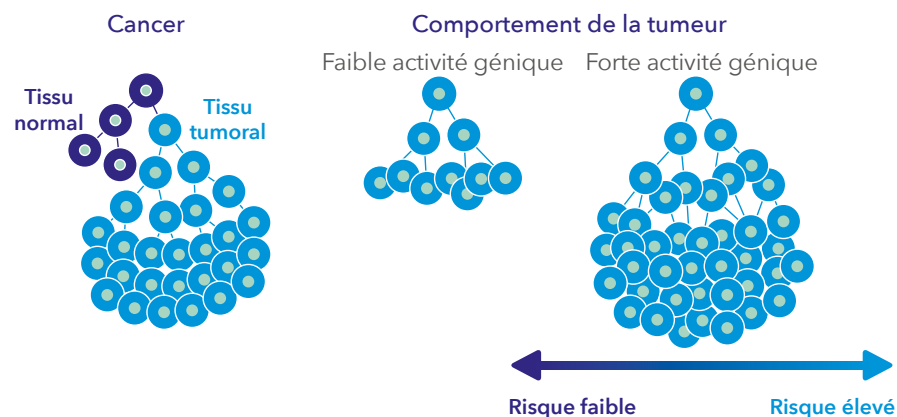

EndoPredict combine cette empreinte génomique de votre cancer du sein à des mesures, telles que la taille de la tumeur et le nombre de ganglions lymphatiques envahis. Cela détermine votre Score de risque EPclin (EPclin Risk Score) individuel, qui permet une évaluation plus précise de votre risque de récurrence précoce et tardive (jusqu'à 15 ans).

$$\begin{array}{c} \text{Score Moléculaire} \\ \text{de 12 Gènes} \\ \text{(Valeur 0-15)} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Taille} \\ \text{de la tumeur} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Statut} \\ \text{ganglionnaire} \end{array} = \text{EPclin Risk Score} \\ \text{(Valeur 1-6)} \\ \text{Classification claire des} \\ \text{risques élevés ou faibles}$$

DES RÉSULTATS CLAIRS ET INDIVIDUALISÉS

Comment interpréter les résultats de votre test EndoPredict ?

Vous recevrez un chiffre, appelé EPclin Risk Score (Score de risque EPclin), qui est reporté sur une échelle représentant la probabilité de récurrence de votre cancer du sein dans le futur. Cela définit votre classe de risque EPclin individuelle (EPclin Risk Class) : risque élevé ou risque faible. Les valeurs inférieures à 3,33 indiquent un risque faible. La valeur de 3,33 est associée à un risque de 10 % de récurrence du cancer du sein à 10 ans et sert de seuil de référence (cut-off).

Résultats

EPclin
Risk Score
2.0

EPclin
Risk Class
Faible

Si vous présentez un risque EPclin faible, il est peu probable que votre cancer récidive et vous pourriez bénéficier d'un traitement hormonal seul pendant 5 ans.

Résultats

EPclin
Risk Score
3.8

EPclin
Risk Class
Élevé

Si vous présentez un risque EPclin élevé, une chimiothérapie et/ou un traitement hormonal prolongé au-delà de 5 ans peuvent vous aider à réduire le risque de récurrence de votre cancer.

Quel que soit
votre résultat,
votre traitement
est personnalisé.





Avec EndoPredict, vous ne faites pas partie d'un groupe. Vous êtes considérée en tant que personne et non comme une catégorie.

ENDOPREDICT PERSONNALISE LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN

Une chimiothérapie est-elle indiquée pour vous ?

EndoPredict identifie le risque individuel de récurrence de votre cancer du sein au cours des 10 prochaines années si vous avez suivi un traitement hormonal seul.³ EndoPredict permet également d'estimer dans quelle mesure une chimiothérapie est susceptible de réduire le risque de récurrence de votre cancer du sein.⁴

Exemple de risque faible	Planification du traitement initial	Probabilité de récurrence à distance de 0 à 10 ans Pour les patientes traitées par hormonothérapie seule pendant 5 ans	3 %
		Bénéfice absolu de la chimiothérapie à 10 ans	0 %
Exemple de risque élevé	Planification du traitement initial	Probabilité de récurrence à distance de 0 à 10 ans Pour les patientes traitées par hormonothérapie seule pendant 5 ans	16 %
		Bénéfice absolu de la chimiothérapie à 10 ans	6 %

Ces informations vous aideront, vous et votre médecin, à prendre une décision sûre et éclairée quant à votre traitement initial.

Une hormonothérapie prolongée devrait-elle être envisagée ?

EndoPredict identifie le risque de récurrence de votre cancer du sein dans les 10 ans qui suivent les 5 années d'hormonothérapie.⁵ Cela peut vous aider, vous et votre médecin, à décider si une hormonothérapie de 5 ans est suffisante ou si une hormonothérapie prolongée devrait être envisagée.

Exemple de risque faible	Planification du traitement à long terme	Probabilité de récurrence à distance tardive de 5 à 15 ans Pour les patientes ne présentant pas de récurrence après 5 ans d'hormonothérapie seule.	2 %
Exemple de risque élevé	Planification du traitement à long terme	Probabilité de récurrence à distance tardive de 5 à 15 ans Pour les patientes ne présentant pas de récurrence après 5 ans d'hormonothérapie seule.	12 %

Ces informations sont fournies avant que vous ne commenciez un traitement médicamenteux, afin que vous puissiez prendre des décisions thérapeutiques pour le présent et l'avenir.

Tant de femmes font l'objet d'un surtraitement par chimiothérapie. Le test EndoPredict permet de prendre en compte les besoins de chaque patiente afin qu'elle reçoive le traitement adéquat.



COMMENT ENDOPREDICT EST-IL RÉALISÉ ?



Les meilleures réponses commencent avec vous

EndoPredict est effectué sur du tissu obtenu lors d'une intervention chirurgicale ou à partir d'un prélèvement par biopsie réalisé préalablement. Pour commencer, veuillez tout d'abord consulter votre médecin pour savoir si l'analyse pronostique de votre tumeur pourrait être appropriée.



Le docteur prescrit le test EndoPredict

Le test peut être demandé dans l'un des laboratoires d'anatomo-pathologie réalisant le test en France. L'anatomo-pathologiste recevra un prélèvement existant de votre tissu tumoral mammaire. Aucun autre prélèvement sanguin ou par biopsie n'est nécessaire.



Vos gènes sont analysés dans le laboratoire d'anatomo-pathologie

EndoPredict, qui utilise la toute dernière technologie d'expression génique basée sur l'ARN de la tumeur, en combinaison avec des facteurs clinico-pathologiques, mesure l'agressivité de votre tumeur.



Résultats des tests disponibles dans un délai d'une semaine environ

Une fois que les résultats sont disponibles, ceux-ci sont envoyés au cabinet de votre médecin. Ce dernier vous aidera ensuite à comprendre le comportement de votre cancer, ce qui vous donnera la confiance nécessaire pour passer à l'étape suivante.



Soyez préparée

Effectuez des recherches sur les traitements possibles du cancer du sein, les effets secondaires et les tests biomarqueurs comme EndoPredict. Présentez-vous à la consultation avec toutes les informations dont le médecin ou les soignants pourraient avoir besoin. N'oubliez pas d'apporter la brochure d'information EndoPredict pour les patientes.



Soyez ouverte et confiante

N'oubliez pas que votre médecin est de votre côté. Vous voulez tous deux ce qu'il y a de mieux pour vous et le succès de la prise en charge de votre cancer est la priorité absolue de tous. Soyez donc ouverte et honnête concernant les traitements potentiels ou les effets secondaires possibles.



Faites-vous accompagner par vos proches

L'appui des membres de la famille ou des amis proches peut faciliter la conversation avec votre médecin quant à votre prise en charge et ils pourront vous soutenir lors de votre prochain rendez-vous.

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE À ENDOPREDICT POUR VOUS AIDER À PRENDRE LA BONNE DÉCISION QUANT À LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE CANCER DU SEIN

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Pourquoi choisir EndoPredict ?



Utilisé
dans plus de
25 pays



Des résultats rapides
pour une planification
précoce du traitement



Votre risque individuel
pour un traitement
personnalisé



Recommandé par des experts
en cancérologie et des
référentiels internationaux

À propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur clé du diagnostic in vitro de spécialité, dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des patients dans les domaines de l'oncologie, de la transplantation et des maladies infectieuses.

Avec plus de 370 employés dans le monde entier, Eurobio Scientific s'engage à fournir un support local grâce à nos quatre unités de fabrication, trois centres de recherche et bureaux locaux en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Notre équipe d'experts en R&D qui rassemble des années d'expérience dans le développement de tests de diagnostic moléculaire a pour principal objectif de mettre à disposition des solutions innovantes pour les professionnels de santé.

En quoi EndoPredict est-il différent des autres tests pronostiques du cancer du sein ?

EndoPredict est différent car, en comparaison directe, il est plus précis que les tests de première génération.^{6,7} EndoPredict est le seul test qui peut prédire le risque de récurrence du cancer du sein sur une période de 15 ans.⁵ Contrairement aux autres tests, il fournit une estimation du bénéfice individuel de la chimiothérapie.⁴ L'estimation du risque peut orienter les décisions thérapeutiques aujourd'hui et dans le futur chez les patientes préménopausées et ménopausées.

EndoPredict est-il un test génétique comme l'analyse *BRCA* ?

Non, EndoPredict est un test génomique qui analyse votre tumeur afin de déterminer l'activité de certains gènes. Ceux-ci indiquent dans quelle mesure votre cancer est susceptible de se développer et de se propager. Cela vous aide, vous et votre médecin, à prendre des décisions thérapeutiques sûres. Le test *BRCA* est un test diagnostique de tumeur *BRCA* mutée et un test génétique qui indique si vous avez une mutation dans un gène associé à un risque plus élevé de développer un cancer du sein au cours de votre vie.

EndoPredict peut-il être utilisé lorsque des ganglions lymphatiques sont envahis ?

Oui, EndoPredict peut être utilisé lorsque des ganglions lymphatiques envahis ont été découverts. EndoPredict fournit le pronostic le plus précis pour les patientes présentant un envahissement ganglionnaire,⁶ et oriente la planification du traitement à la fois précoce et à long terme.

Où trouver de plus amples renseignements ?

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur EndoPredict sur notre site web www.eurobio-scientific.de



Références :

1. International Agency for Research On Cancer, WHO, GLOBOCAN 2020. Breast fact sheet, 2020. Accessed on August 09, 2022. <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf>. 2022. 2. Surveillance Research Program, National Cancer Institute. SEER Explorer. Breast cancer- Comparison of cancer risk, 2017-2019, by risk type and risk interval, female, all races, risk from age 0. Accessed on August 09, 2022. <https://seer.cancer.gov/explorer/>, 2022. 3. Filipits, Martin et al. "A New Molecular Predictor Of Distant Recurrence In ER-Positive, HER2-Negative Breast Cancer Adds Independent Information To Conventional Clinical Risk Factors". Clinical Cancer Research, vol 17, no. 18, 2011, pp. 6012-6020. 4. Sestak, Ivana et al. "Prediction Of Chemotherapy Benefit By EndoPredict In Patients With Breast Cancer Who Received Adjuvant Endocrine Therapy Plus Chemotherapy Or Endocrine Therapy Alone". Breast Cancer Research And Treatment, vol 176, no. 2, 2019, pp. 377-386. 5. Filipits, Martin et al. "Prediction Of Distant Recurrence Using EndoPredict Among Women With ER+, HER2- Node-Positive And Node-Negative Breast Cancer Treated With Endocrine Therapy Only". Clinical Cancer Research, vol 25, no. 13, 2019, pp. 3865-3872. 6. Sestak, Ivana et al. "Comparison Of The Performance Of 6 Prognostic Signatures For Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer". JAMA Oncology, vol 4, no. 4, 2018, pp. 545-553. 7. Buus, Richard et al. "Comparison Of EndoPredict And EPclin With Oncotype DX Recurrence Score For Prediction Of Risk Of Distant Recurrence After Endocrine Therapy". Journal Of The National Cancer Institute, vol 108, no. 11, 2016, p. djw149.



eurobio
SCIENTIFIC



Eurobio Scientific GmbH, Nattermannallee 1, Building S19, 50829 Köln, Germany
(Distribué par Eurobio Scientific)



Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. A destination des professionnels de santé.



Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.

Eurobio Scientific
7 Avenue de Scandinavie
91940 Les Ulis
France

info-fr@eurobio-scientific.de
www.eurobio-scientific.de



Eurobio Scientific, le logo Eurobio Scientific, EndoPredict et le logo EndoPredict sont des marques commerciales ou marques déposées de Eurobio Scientific. ©2025 Eurobio Scientific GmbH

ENDO_PT_BRO_GUIDE_04_25_FR

